

— PROTHESE DES DAUMENSATTEL-
GELENKS

MAÏA™



DOKUMENTATION




groupe lépine

Depuis 1714

PFANNE

- Titanlegierung
- Fixierung ohne Zement, durch Plasma-projektion im Vakuum erstellte Zweifach-beschichtung mit porösem nicht legierten Titan und mit Hydroxylapatit
- Äußere Makrostruktur: 4 polare Stabili-sationsnoppen, 1 äquatoriale Verdickung zur Press-fit-Fixierung
- Einlage aus Polyethylen UHMW und im Vakuum verpackt
- 2 Designs: Standard oder halbretentiv
- Sterilisation durch Gammastrahlen

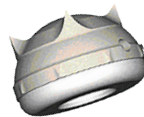

TRAPEZOID-PFANNE Ø9

Bezeichnungen	Referenz
TRAPEZOID-PFANNE STD Ø9	M100 1009
TRAPEZOID-PFANNE RETENTIV Ø9	M100 2009
TRAPEZOID-PFANNE STD Ø10	M100 1010
TRAPEZOID-PFANNE RETENTIV Ø10	M100 2010
TRAPEZOID-PFANNE ZEMENTIERBAR	M100 4009

SCHAFT

- Titanlegierung
- Fixierung ohne Zement, durch Plasmaprojektion im Vakuum erstellte Zweifachbeschichtung mit porösem nicht legierten Titan und mit Hydroxylapatit
- Äußere Makrostruktur: Schuppen auf den longitudinalen Graten zur Stabilisierung, Morsekonus 6° zur modularen Halsmontage
- Anatomisches Design, der Schaft passt sich dem metakarpalen Markkanal an
- Sterilisation durch Gammastrahlen



METAKARPALSCHAFT

Bezeichnungen	Referenz
METAKARPALSCHAFT T7S	M100 0017
METAKARPALSCHAFT T8S	M100 0018
METAKARPALSCHAFT T9S	M100 0019
METAKARPALSCHAFT T10	M100 0010

METAKARPALSCHAFT LANG

Bezeichnungen	Referenz
METAKARPALSCHAFT T7	M100 0007
METAKARPALSCHAFT T8	M100 0008
METAKARPALSCHAFT T9	M100 0009

HALS

- rostfreier Stahl
- modular
- gerade Geometrie oder verschoben zur anatomischen Anpassung
- sphärischer Kopf mit 4 mm Durchmesser
- Sterilisation durch Gammastrahlen



GERADER HALS

Bezeichnungen	Charakteristika	Referenz
GERADER HALS M	mittel	M100 0500
GERADER HALS L	lang	M100 0501
GERADER HALS XL	extra lang	M100 0502



SCHRÄGER HALS

Bezeichnungen	Charakteristika	Referenz
SCHRÄGER HALS M	mittel	M100 0600
SCHRÄGER HALS L	lang	M100 0601
SCHRÄGER HALS XL	extra lang	M100 0602
SCHRÄGER HALS XXL	super extra lang	M100 0603

SCHRÄGER HALS IN TITANLEGIERUNG für allergische Patienten



Bezeichnungen	Charakteristika	Referenz
SCHRÄGER TITAN HALS M	mittel	M100 0610
SCHRÄGER TITAN HALS L	lang	M100 0611
SCHRÄGER TITAN HALS XL	extra lang	M100 0612
SCHRÄGER TITAN HALS XXL	super extra lang	M100 0613



groupe lépine

Depuis 1714

medkoh
MEDIZINTECHNIK



OPS und IPS
Lösungen



Chirurgische
Disziplinen



Steriltechnik
und Hygiene



Patienten-
lagerungen