



MedLED® Spectra

Kabellose chirurgische Stirnleuchte



Konzentrieren Sie sich auf das hell erleuchtete Operationsfeld mit völliger Freiheit und vollem Komfort.

MedLED® Spectra

Kabellose chirurgische Stirnleuchte

Freiheit ohne Abstriche

Die MedLED® Spectra-Stirnleuchte verfügt über die modernste Lichttechnologie, um das einst Unmögliche möglich zu machen: eine lautlose, komfortable, kabellose Stirnleuchte, die in der Klinik oder im Operationsaal vielseitig einsetzbar ist und Ihr chirurgisches Erlebnis in Bezug auf Intensität und Spotgröße erweitern wird.

Merkmale Lichtintensität:

- G3 - 100.000 lux
- G6 - 200.000 lux
- G8 - 300.000 lux – jetzt noch heller

Akkulaufzeit (unendlich mit 4-Schacht-Ladegerät):

- G3 - 10 Std.
- G6 - 8 Std.
- G8 - 5 Std.

Leichtes Gewicht:

Die Stirnleuchte wiegt 260 g

USB-Ladedauer:

4 Stunden (2 Akkus)

Ladedauer im 4-Schacht-Ladegerät:

2 Stunden (4 Akkus); gleichzeitiges Aufladen von bis zu zwei Sets

Justierung:

Volle Einstellbarkeit des Strahlwinkels und größerer Spotgrößenbereich

Spot-Qualität:

Scharf abgegrenzter, kreisförmiger Strahl mit homogenem Licht

Umwandelbar:

Auswechselbarer Kopfbügel für Hard- oder Softtop

Freiheit ohne Kompromisse

Wenn Sie eine leistungsfähige, langlebige, komfortable Stirnleuchte ohne Kabel suchen, kann Ihnen KLS Martin ein vollständiges Sortiment an Stirnleuchten mit passendem Zubehör anbieten.

200 mm
G8

100 mm
G3


90 mm
G6

maximaler Spotdurchmesser
Maßstab 1:1

Unübertroffene Helligkeit

MedLED® Spectra ist die Leuchte, die sich mit zwei Kopfbändern und drei Lichtoptionen an Sie anpasst. Wählen Sie eine Leuchte, die einen Strahl erzeugt, der hell genug ist, um alles Notwendige in Klinik und OP zu sehen.

Intensität und Helligkeit

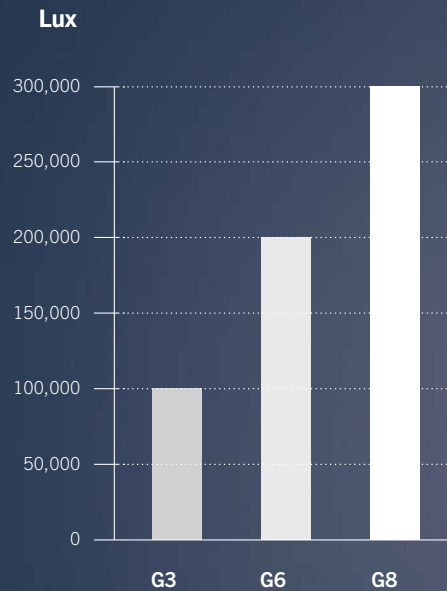


Quiet-Cool™ Kühlkörper-Technologie

Kühl und leise
Um unnötiges Erwärmen zu vermeiden, wird die LED mithilfe einer firmeneigenen Technologie sofort gekühlt. Wir haben außerdem das Gehäuse so gestaltet, dass es mögliche Restwärme selbst ableitet.

Lüfter brauchen mehr Strom und dadurch große Akkus, die an der Taille des Benutzers befestigt werden müssen. Hiermit gehören die Lüfter der Vergangenheit an.



Einstellbarkeit und Steuerung des Spots

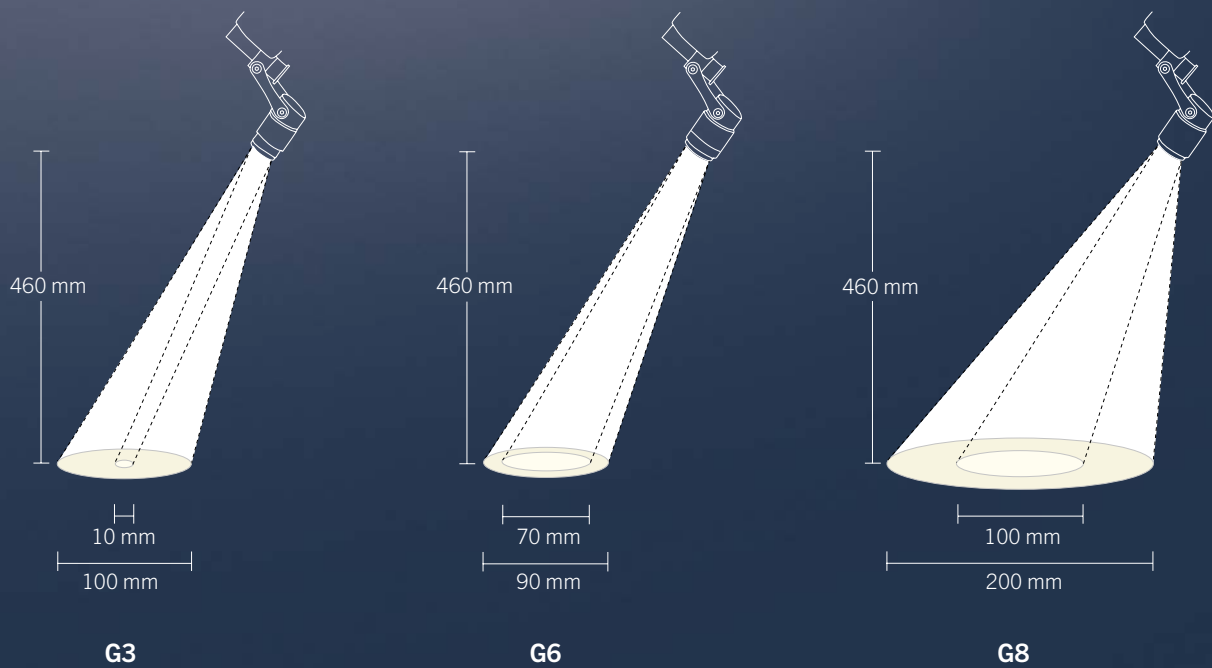

Umwandelbar

Das Kit wird umwandelbar mit Hardtop und Softtop geliefert, die für optimalen Komfort zur Auswahl stehen.

Hardtop



Softtop



Ein- und Ausklicken für eine praktische Umwandlung




Kabellos

Lösen Sie sich von Kabeln und schweren Gürtelakkus. Die Dual Everlast™-Akkus sind in das patentierte Kopfband integriert und können ohne Leistungsverlust gewechselt werden.

Akkulaufzeit

Stunden

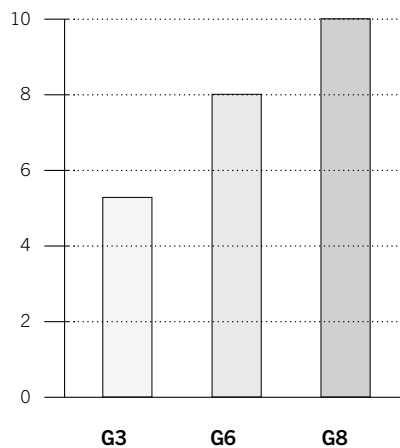

Extra Leistung

Die neueste
Lithium-Akku-Technologie



4-Schacht-Desktop-Ladegerät

Aufladen über Backup-Station




Schnelles USB-C-Ladegerät


Aufladen über das Kopfband




MedLED® Spectra
Stirnleuchten
Sofort einsatzbereit!



	MedLED® Spectra G3	Art.-Nr.
	bestehend aus:	17-510-30-04 Spectra G3-Standard-Kit*
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spectra G3-Stirnleuchte ■ Tragekoffer ■ Universal-Netzstecker ■ Umrüstsatz für Polsterungen ■ 2 wiederaufladbare Lithium-Polymer-Akkus 	17-510-31-04 Spectra G3-Krankenhaus-Kit*

	MedLED® Spectra G6	Art.-Nr.
	bestehend aus:	17-510-60-04 Spectra G6-Standard-Kit*
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spectra G6-Stirnleuchte ■ Tragekoffer ■ Universal-Netzstecker ■ Umrüstsatz für Polsterungen ■ 2 wiederaufladbare Lithium-Polymer-Akkus 	17-510-61-04 Spectra G6-Krankenhaus-Kit*


	MedLED® Spectra G8	Art.-Nr.
	bestehend aus:	17-510-80-04 Spectra G8-Standard-Kit*
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spectra G8-Stirnleuchte ■ Tragekoffer ■ Universal-Netzstecker ■ Umrüstsatz für Polsterungen ■ 2 wiederaufladbare Lithium-Polymer-Akkus 	17-510-81-04 Spectra G8-Krankenhaus-Kit*

*Das Krankenhaus-Kit (KK) enthält 4 zusätzliche Akkus und ein 4-Schacht-Tischladegerät (Art.-Nr. 17-510-13-04) für zusätzliche Akkukapazität in einer Umgebung mit hohem Verbrauch.




MedLED® Spectra Zubehör

Vergrößerungslinsen G3

	Dioptrien	Vergrößerung	Erhöhung der Sehstärke	Optische Leistung	Empfohlener Arbeitsabstand (Brennweite)	Art.-Nr.
	+ 2	+ 0,40	40 %	1,4 x	250 mm	17-500-12-04
	+ 3	+ 0,60	60 %	1,6 x	220 mm	17-500-13-04
	+ 4	+ 0,80	80 %	1,8 x	200 mm	17-500-14-04

Vergrößerungslinsen G6 / G8

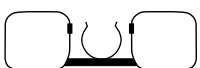	Dioptrien	Vergrößerung	Erhöhung der Sehstärke	Optische Leistung	Empfohlener Arbeitsabstand (Brennweite)	Art.-Nr.
	+ 2	+ 0,40	40 %	1,4 x	250 mm	17-500-22-04
	+ 3	+ 0,60	60 %	1,6 x	220 mm	17-500-23-04
	+ 4	+ 0,80	80 %	1,8 x	200 mm	17-500-24-04

MedLED® Spectra Zubehör



17-510-13-04
4-Schacht-Desktop-Ladegerät



17-510-10-04
Ersatzakkus (2 St.)



17-510-11-04
USB-C-Netzstecker



17-510-06-04
Ersatzpolster-Set



17-510-15-04
Kameraadapter



17-500-29-04
Koffer



Leuchtkörper



17-510-32-04
G3



17-510-62-04
G6



17-510-82-04
G8

Gelbfilter (für Dental)



17-500-34-04
G3



17-500-35-04
G6



17-510-14-04
Wandladestation für 4 Kopfteile

17-510-08-04
Ersatz-Kopfteil

17-510-07-04
Kopfband-Set (HT und ST)

KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd.

Sydney · Australien
Tel. +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.

São Paulo · Brasilien
Tel +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.

Shanghai · China
Tel. +86 21 5820 6251
info@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai · Indien
Tel. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

KLS Martin Italia S.r.l.

Mailand · Italien
Tel. +39 039 605 67 31
info@klsmartin.com

KLS Martin Japan K.K.

Tokio · Japan
Tel. +81 3 3814 1431
info@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Penang · Malaysia
Tel. +604 261 7060
malaysia@klsmartin.com

KLS Martin de México, S.A. de C.V.

Mexiko-Stadt · Mexiko
Tel. +52 55 7572 0944
mexico@klsmartin.com

KLS Martin Nederland B.V.

Huizen · Niederlande
Tel. +31 35 523 45 38
infonl@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Moskau · Russland
Tel. +7 499 792 76 19
russia@klsmartin.com

KLS Martin Taiwan Ltd.

Taipei · Taiwan
Tel. +886 2 2325 3169
taiwan@klsmartin.com

KLS Martin LP

Jacksonville · Florida, USA
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Dubai · Vereinigte Arabische Emirate
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.

Reading · Vereinigtes Königreich
Tel. +44 118 467 1500
info.uk@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Hanoi · Vietnam
Tel. +49 7461 706-0
info@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG

Ein Unternehmen der KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Deutschland
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Deutschland
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com